



*DentaFit* (зубной тренажер)  
**Иновация** для улучшения  
Вашего стоматологического здоровья!

**"DentaFit"**


(зубной тренажер)

- ✓ Предназначен для **восполнения дефицита жевательной нагрузки**.
- ✓ Является действенным средством **профилактики** кариеса зубов, заболеваний пародонта.
- ✓ «Тренирует» жевательный аппарат, усиливает кровоснабжение мышц и кожи лица, **предупреждая появление морщин**.
- ✓ Способствует формированию **правильного зубного прикуса**.

### **Инструкция по применению** (см схему)

1. Установив *зубной тренажер* на задние зубы *широкими пазами*, обращенными к их коронкам, совершите 10 жевательных движений.
2. Перемещая устройство, с помощью языка, по зубному ряду, добейтесь вышеуказанного воздействия на все зубы, причем в области клыков и резцов необходимо, чтобы тренажер *узкими пазами* был обращен к коронкам этих зубов.
3. Длительность процедуры 1-2 мин.
4. После применения *зубной тренажер* промыть проточной водой.

5. Рекомендуется использовать *зубной тренажер* после каждого приема пищи.

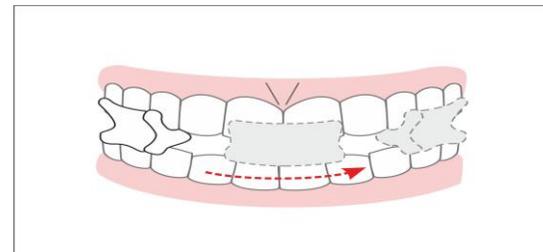

Длительность использования

При периодичности применения 2-3 раза в день, рекомендуемый срок его использования составляет 1 месяц.

### **Противопоказания к использованию**

Острый периодонтит, обострение хронического периодонтита, пародонтит, стоматит, острый артрит височно-нижнечелюстного сустава, опухолевые заболевания десен.

Защищено патентом РФ №2493806 от 27.09.2013.

Удостоен бронзовой медали X Московского Международного Салона инвестиций и инноваций (2010 г.).

Производитель: ООО «КМИнТ».

Контактная информация: г. Казань, ул. Гвардейская 16Б, тел: +79172826343.

Состав: 100% силикон (USA сертификат 21 CFR 177.2600).